



フィットフィックス®

- フィットフィックスは凝固剤一体型の密閉方式。吸引終了後に、フタを開けることなく指一本で排液を凝固。焼却処分が可能です。
- 容器内に溜まった排液は、血液濃度、量ともに千差万別。凝固剤の偏りや凝固不十分を避けるため、独自の凝固剤と投入方法を開発。
- 堅牢で透明性の高いボトルタイプ、収納・廃棄にコンパクトなバッグタイプ。用途に合わせて選べる容器形態。
- 配管への吸い込み事故防止のため、液体を吸収すると一瞬で膨潤し、吸引をストップするフローストッパーを採用。ミストの99%を捕捉します。(ファイナルタイプのみ)
- ベーシックな吸引機能だけの排出型に、必要に応じて凝固剤を取り付ければ、凝固剤一体型として凝固・廃棄が可能。臨機応変に利用できます。

一般医療機器 特定保守管理医療機器
 一般的名称：真空吸引器
 医療機器届出番号：27B1X00013000001
 販売名：フィットフィックス

大研医器株式会社

▼排液処理容器

品番	品名	凝固剤	フローストッパー	入数	希望小売価格(税別)
DKI-RD852P	ボトルタイプ一体型2Lプレ	○		15本 × 2箱	54,000円
DKI-RD852F	ボトルタイプ一体型2Lファイナル	○	○	15本 × 2箱	60,000円
DKI-RD851F	ボトルタイプ一体型1Lファイナル	○	○	15本 × 2箱	45,000円
DKI-RD862P	バッグタイプ一体型2Lプレ	○		10本 × 5箱	80,000円
DKI-RD862F	バッグタイプ一体型2Lファイナル	○	○	10本 × 5箱	90,000円
DKI-FF861	バッグタイプ一体型1L	○	○	10本 × 5箱	60,000円
DKI-FF2863P	バッグタイプ排出型3.5Lプレ			10本 × 5袋	42,500円
DKI-FF2863F	バッグタイプ排出型3.5Lファイナル		○	10本 × 5袋	50,000円
DKI-RD4862P	バッグタイプ排出型2Lプレ			10本 × 5袋	42,500円
DKI-RD4862F	バッグタイプ排出型2Lファイナル		○	10本 × 5袋	50,000円
DKI-FF2861	バッグタイプ排出型1Lファイナル		○	10本 × 5袋	37,500円

▼付属消耗品

品番	品名	入数	備考	希望小売価格(税別)
DKI-RD8503	微量ボトル	15本 × 2箱	精密計量用	54,000円
DKI-FF8453	凝固剤ユニット3.5L	50個	バッグタイプ排出型3.5L専用	25,000円
DKI-TF5020	凝固剤ユニット2L	50個	バッグタイプ排出型2L専用	25,000円
DKI-FF8451	凝固剤ユニット1L	50個	バッグタイプ排出型1L専用	20,000円
DKI-RD846	微量ボトル用凝固剤ユニット	50個	微量ボトル専用	15,000円
DKI-RD920	排液凝固剤	30本	1本あたり220g入り	18,000円
DKI-RD888	エルボ	120個	白色	12,000円
DKI-RD841	フローストッパー	30個	配管保護用	27,000円
DKI-RD841W	フローストッパー付きチューブセット	30個	過貯溜防止用(1L・2L共通)	27,000円
DKI-FF8413	3.5L用フローストッパー	30個	過貯溜防止用(3.5L専用)	27,000円

▼付属備品

品番	品名	入数	備考	希望小売価格(税別)
DKI-FF703(H・L)	FFキャスターセットボトル用(H・L)	1セット	キャスター単体(H・L)+ボトルホルダー-2L(3個)+ボトルホルダー-1L(1個)	各27,500円
DKI-FF766K	FF1Lボトル壁掛けセット	1セット	RG-300+ボトルホルダー-1Lセット+配管アダプター/川重・ユニ式	30,000円
DKI-FF766A	FF1Lボトル壁掛けセット	1セット	RG-300+ボトルホルダー-1Lセット+配管アダプター/アムコ式	30,000円
DKI-FF768K	FF2Lボトル壁掛けセット	1セット	RG-300+ボトルホルダー-2Lセット+配管アダプター/川重・ユニ式	30,000円
DKI-FF768A	FF2Lボトル壁掛けセット	1セット	RG-300+ボトルホルダー-2Lセット+配管アダプター/アムコ式	30,000円
DKI-FF712	FFボトルホルダー-1L	1個	ボトル用ホルダー-1L単品	3,300円
DKI-FF722	FFボトルホルダー-2L	1個	ボトル用ホルダー-2L単品	3,300円
DKI-FF713	FFボトルホルダー-1Lセット	1セット	ボトルホルダー-1L+壁掛け用ニップル+シリコンチューブ(30cm)	6,500円
DKI-FF723	FFボトルホルダー-2Lセット	1セット	ボトルホルダー-2L+壁掛け用ニップル+シリコンチューブ(30cm)	6,500円
DKI-FF707(H・L)	FFキャスターセットバッグ用(H・L)	1セット	キャスター単体(H・L)+キャニスター-2Lプレ(3個)+キャニスター-2Lファイナル(1個)	各43,000円
DKI-FF708H	FFキャスターセット3.5L用H	1セット	キャスター単体(H)+キャニスター-3.5L(2個)	37,000円
DKI-FF765K	FF1Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-300+キャニスター-1L+キャニスター用フック+配管アダプター/川重・ユニ式	32,000円
DKI-FF765A	FF1Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-300+キャニスター-1L+キャニスター用フック+配管アダプター/アムコ式	32,000円
DKI-FF767K	FF2Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-300+キャニスター-2L+キャニスター用フック+配管アダプター/川重・ユニ式	32,000円
DKI-FF767A	FF2Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-300+キャニスター-2L+キャニスター用フック+配管アダプター/アムコ式	32,000円
DKI-FF7301	キャニスター-1L	1個	バッグタイプ1L用	5,000円
DKI-RD730P	キャニスター-2Lプレ	1個	バッグタイプ2Lプレ用	5,200円
DKI-RD730F	キャニスター-2Lファイナル	1個	バッグタイプ2Lファイナル用	5,300円
DKI-FF7303	キャニスター-3.5L	1個	バッグタイプ3.5L(プレ・ファイナル)用	7,600円
DKI-RD792	キャニスター用フック	1個	壁掛け用	3,500円
RG-300	フィットフィックスレギュレータ	1台		23,500円
RD-822KC	配管アダプター	1個	川重・ユニ式	2,400円
RD-822A	配管アダプター	1個	アムコ式	2,400円
DKI-RD886	三方活栓	1個	吸引切替用	18,000円
DKI-RD890	ボール弁付きニップル	1個	開閉バルブ	7,000円
DKI-FF704(H・L)	FFキャスター単体(H・L)	1台	高・低/ボトル/バッグ兼用	各19,000円
DKI-FF794K	FFキャスター-架台セット	1セット	レギュレータ架台+シリコンチューブ(50cm)+配管アダプター/川重・ユニ式	6,500円
DKI-FF794A	FFキャスター-架台セット	1セット	レギュレータ架台+シリコンチューブ(50cm)+配管アダプター/アムコ式	6,500円

- ご注文はケース・セット単位でお願いします。
- 記載の希望小売価格には、消費税は含まれておりません。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
- クーデック、COOPDECH、フィットフィックス、FITFIXは大研医器株式会社の登録商標です。



製造販売業者

大研医器株式会社
 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

本社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2 TEL 0725-30-3150
 (製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください)
 札幌支店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F TEL 011-708-3060
 仙台支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル6F TEL 022-214-4561
 さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7F TEL 048-650-9925
 東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F TEL 03-5835-5011
 横浜支店 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F TEL 045-872-0700
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第一ビル7F TEL 052-559-1286
 金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBE 4F TEL 076-238-9950
 大阪支店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 レナ天満橋ビル7F TEL 06-6943-1161
 広島支店 〒732-0827 広島市南区福荷町5-18 三共福荷町ビル2F TEL 082-568-2377
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトビル5F TEL 092-481-1751
 COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます → <http://www.daiken-iki.co.jp/>

代理店



この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

2020.9

カタログ記載内容2020年9月現在 (2009B)



FitFix

Disposable Suction Bag & Bottle

セーフティー & インфекションコントロール。医療用吸引器の新スタンダード。



スタンダードタイプ



壁掛けタイプ

BAG TYPE

病棟向け・壁掛け用に1L。内視鏡・手術室に2L。大容量の3.5Lと豊富なバリエーションの中から使用現場に適したサイズを選べます。



1L バッグタイプ




2L バッグタイプ



3.5L バッグタイプ



キャニスター

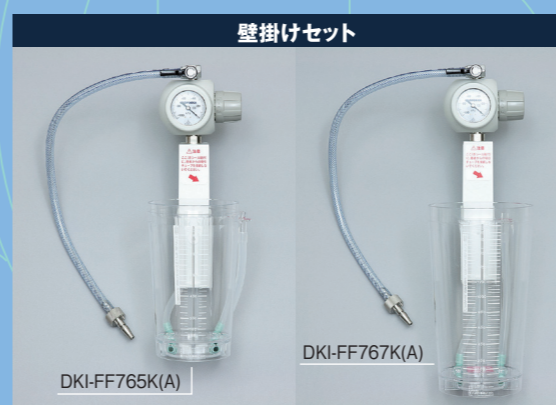

壁掛けセット

BOTTLE TYPE

1L、2Lの2サイズからお選びください。



1L・2L ボトルタイプ




壁掛けセット

ACCESSORY

軽量・コンパクト、耐久性を追求し、使い勝手を考慮した豊富なアクセサリ。



キャスター

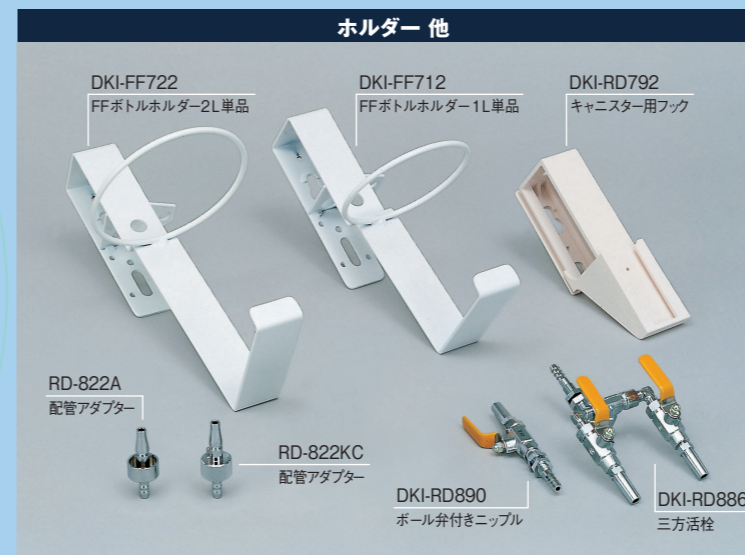

ホルダー 他



付属消耗品



RG-300
フィットフィックスレギュレータ



コネクティングチューブ

一般医療機器
一般的名称：吸引チューブ
医療機器届出番号：27B1X00013000002
販売名：クーデックコネクティングチューブ
※別途カタログをご請求ください

理想的密閉方式

フィットフィックスは凝固剤一体型の密閉方式。吸引終了後に、フタを開けることなく指一本で排液を凝固。焼却処分が可能です。

計算された凝固能力

容器内に溜まった排液は、血液濃度、量ともに千差万別。凝固剤の偏りや凝固不十分を避けるため、独自の凝固剤と投入方法を開発。

ボトルタイプ、バッグタイプ

堅牢で透明性の高いボトルタイプ、収納・廃棄にコンパクトなバッグタイプ。用途に合わせて選べる容器形態。

フローストッパー

配管への吸い込み事故防止のため、液体を吸収すると一瞬で膨潤し、吸引をストップするフローストッパーを採用。ミストの99%を捕捉します。(ファイナルタイプのみ)

排出型、凝固一体型

ベーシックな吸引機能だけの排出型に、必要に応じて凝固剤を取り付けられ、凝固剤一体型として凝固・廃棄が可能。臨機応変に利用できます。