

品 番	品 名	凝固剤	フローストッパー	入 数
DKI-RD852P	ボトルタイプ一体型2Lプレ	○		15本 × 2箱
DKI-RD852F	ボトルタイプ一体型2Lファイナル	○	○	15本 × 2箱
DKI-RD851F	ボトルタイプ一体型1Lファイナル	○	○	15本 × 2箱
DKI-RD862P	バッグタイプ一体型2Lプレ	○		10本 × 5箱
DKI-RD862F	バッグタイプ一体型2Lファイナル	○	○	10本 × 5箱
DKI-FF861	バッグタイプ一体型1L	○	○	10本 × 5箱
DKI-FF2863P	バッグタイプ排出型3.5Lプレ			10本 × 5袋
DKI-FF2863F	バッグタイプ排出型3.5Lファイナル		○	10本 × 5袋
DKI-RD4862P	バッグタイプ排出型2Lプレ			10本 × 5袋
DKI-RD4862F	バッグタイプ排出型2Lファイナル		○	10本 × 5袋
DKI-FF2861	バッグタイプ排出型1Lファイナル		○	10本 × 5袋

品 番	品 名	入 数	備 考
DKI-RD8503	微量ボトル	15本 × 2箱	精密計量用
DKI-FF8453	凝固剤ユニット3.5L	50個	バッグタイプ排出型3.5L専用
DKI-TF5020	凝固剤ユニット2L	50個	バッグタイプ排出型2L専用
DKI-FF8451	凝固剤ユニット1L	50個	バッグタイプ排出型1L専用
DKI-RD846	微量ボトル用凝固剤ユニット	50個	微量ボトル専用
DKI-RD920	排液凝固剤	30本	1本あたり220g入り
DKI-RD888	エルボ	120個	白色
DKI-RD841	フローストッパー	30個	配管保護用
DKI-RD841W	フローストッパー付きチューブセット	30個	過貯溜防止用(1L・2L共通)
DKI-FF8413	3.5L用フローストッパー	30個	過貯溜防止用(3.5L専用)

	品 番	品 名	入 数	備 考
ボ ト ル タ イ プ	DKI-FF703(H・L)	FFキャスターセットボトル用(H・L)	1セット	キャスター単体(H・L)＋ボトルホルダー2L(3個)＋ボトルホルダー1L(1個)
	DKI-FF766K	FF1Lボトル壁掛けセット	1セット	RG-300＋ボトルホルダー1Lセット＋配管アダプター／川重・ユニ式
	DKI-FF766A	FF1Lボトル壁掛けセット	1セット	RG-300＋ボトルホルダー1Lセット＋配管アダプター／アムコ式
	DKI-FF768K	FF2Lボトル壁掛けセット	1セット	RG-300＋ボトルホルダー2Lセット＋配管アダプター／川重・ユニ式
	DKI-FF768A	FF2Lボトル壁掛けセット	1セット	RG-300＋ボトルホルダー2Lセット＋配管アダプター／アムコ式
	DKI-FF712	FFボトルホルダー1L	1個	ボトル用ホルダー1L単品
	DKI-FF722	FFボトルホルダー2L	1個	ボトル用ホルダー2L単品
	DKI-FF713	FFボトルホルダー1Lセット	1セット	ボトルホルダー1L＋壁掛け用ニップル＋シリコンチューブ(30cm)
DKI-FF723	FFボトルホルダー2Lセット	1セット	ボトルホルダー2L＋壁掛け用ニップル＋シリコンチューブ(30cm)	
バ グ タ イ プ	DKI-FF707(H・L)	FFキャスターセットバッグ用(H・L)	1セット	キャスター単体(H・L)＋キャニスター2Lプレ(3個)＋キャニスター2Lファイナル(1個)
	DKI-FF708H	FFキャスターセット3.5L用H	1セット	キャスター単体(H)＋キャニスター3.5L(2個)
	DKI-FF765K	FF1Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-300＋キャニスター1L＋キャニスター用フック＋配管アダプター／川重・ユニ式
	DKI-FF765A	FF1Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-300＋キャニスター1L＋キャニスター用フック＋配管アダプター／アムコ式
	DKI-FF767K	FF2Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-300＋キャニスター2L＋キャニスター用フック＋配管アダプター／川重・ユニ式
	DKI-FF767A	FF2Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-300＋キャニスター2L＋キャニスター用フック＋配管アダプター／アムコ式
	DKI-FF7301	キャニスター1L	1個	バッグタイプ1L用
	DKI-RD730P	キャニスター2Lプレ	1個	バッグタイプ2Lプレ用
	DKI-RD730F	キャニスター2Lファイナル	1個	バッグタイプ2Lファイナル用
	DKI-FF7303	キャニスター3.5L	1個	バッグタイプ3.5L(プレ・ファイナル)用
DKI-RD792	キャニスター用フック	1個	壁掛け用	
部 品	RG-300	フィットフィックスレギュレータ	1台	
	RD-822KC	配管アダプター	1個	川重・ユニ式
	RD-822A	配管アダプター	1個	アムコ式
	DKI-RD886	三方活栓	1個	吸引切替用
	DKI-RD890	ボール弁付きニップル	1個	開閉バルブ
	DKI-FF704(H・L)	FFキャスター単体(H・L)	1台	高・低／ボトル・バッグ兼用
	DKI-FF794K	FFキャスター架台セット	1セット	レギュレータ架台＋シリコンチューブ(50cm)＋配管アダプター／川重・ユニ式
	DKI-FF794A	FFキャスター架台セット	1セット	レギュレータ架台＋シリコンチューブ(50cm)＋配管アダプター／アムコ式

- ご注文はケース・セット単位でお願いします。
- 記載の希望小売価格には、消費税は含まれておりません。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
- クーデック、COOPDECH、フィットフィックス、FITFIXは大研医器株式会社の登録商標です。

製造販売業者

 **大研医器株式会社**
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

本 社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2 TEL 0725-30-3150
 〈製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください〉
 札幌支店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F TEL 011-708-3060
 仙台支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル6F TEL 022-214-4561
 さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7F TEL 048-650-9925
 東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F TEL 03-5835-5011
 横浜支店 〒220-0004 横浜西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F TEL 045-872-0700
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第一ビル7F TEL 052-559-1286
 金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBE 4F TEL 076-238-9950
 大阪支店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 レナ天満橋ビル7F TEL 06-6943-1161
 広島支店 〒732-0827 広島市南区福荷町5-18 三共福荷町ビル2F TEL 082-568-2377
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトリビル5F TEL 092-481-1751
 COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます→ <http://www.daiken-iki.co.jp/>

代理店



この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

2023. 2

カタログ記載内容2023年2月現在
(2302B)



COOPDECH

フィットフィックス®

- フィットフィックスは凝固剤一体型の密閉方式。
吸引終了後に、フタを開けることなく指一本で排液を凝固。焼却処分が可能です。
- 容器内に溜まった排液は、血液濃度、量ともに千差万別。
凝固剤の偏りや凝固不十分を避けるため、独自の凝固剤と投入方法を開発。
- 堅牢で透明性の高いボトルタイプ、収納・廃棄にコンパクトなバッグタイプ。
用途に合わせて選べる容器形態。
- 配管への吸い込み事故防止のため、液体を吸収すると一瞬で膨潤し、
吸引をストップするフローストッパーを採用。
ミストの99%を捕捉します。(ファイナルタイプのみ)
- ベーシックな吸引機能だけの排出型に、必要に応じて凝固剤を取り付ければ、
凝固剤一体型として凝固・廃棄が可能。臨機応変に利用できます。

一般医療機器 特定保守管理医療機器
 一般的名称：真空吸引器
 医療機器届出番号：27B1X00013000001
 販売名：フィットフィックス

 **大研医器株式会社**





FitFix

Disposable Suction Bag & Bottle

セーフティー＆ インフェクションコントロール。 医療用吸引器の新スタンダード。



スタンダードタイプ



壁掛けタイプ

理想的密閉方式

フィットフィックスは凝固剤一体型の密閉方式。吸引終了後に、フタを開けることなく指一本で排液を凝固。焼却処分が可能です。

計算された凝固能力

容器内に溜まった排液は、血液濃度、量ともに千差万別。凝固剤の偏りや凝固不十分を避けるため、独自の凝固剤と投入方法を開発。

ボトルタイプ、バッグタイプ

堅牢で透明性の高いボトルタイプ、収納・廃棄にコンパクトなバッグタイプ。用途に合わせて選べる容器形態。

フローストッパー


配管への吸い込み事故防止のため、液体を吸収すると一瞬で膨潤し、吸引をストップするフローストッパーを採用。ミストの99%を捕捉します。(ファイナルタイプのみ)

排出型、凝固一体型

ベーシックな吸引機能だけの排出型に、必要に応じて凝固剤を取り付けられ、凝固剤一体型として凝固・廃棄が可能。臨機応変に利用できます。

BAG TYPE

病棟向け・壁掛け用に1L。内視鏡・手術室に2L。大容量の3.5Lと豊富なバリエーションの中から使用現場に適したサイズを選べます。

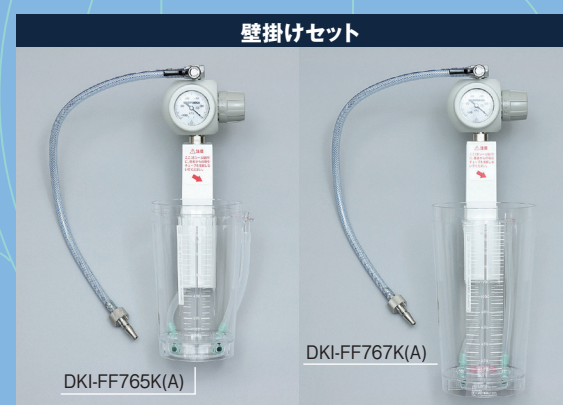



BOTTLE TYPE

1L、2Lの2サイズからお選びください。



ACCESSORY

軽量・コンパクト、耐久性を追求し、
使い勝手を考慮した豊富なアクセサリ。

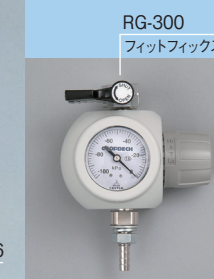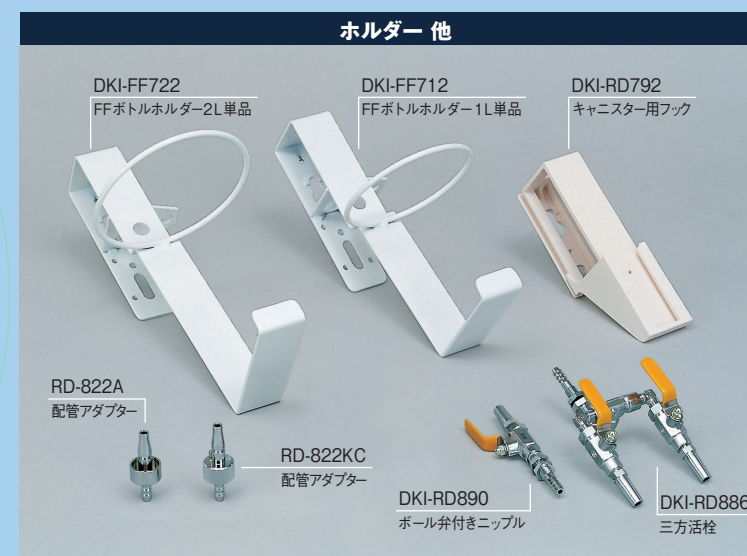

コネクティングチューブ



一般医療機器
一般名称：吸引チューブ
医療機器届出番号：27B1X00013000002
販売名：クーデックコネクティングチューブ

※別途カタログをご請求ください